

あなたをやさしくエスコートする…

**カワムラサイクル**



## ムーンウォーカー KW-MMX シリーズ

### 取扱説明書



|              |   |
|--------------|---|
| 安全に関するご注意    | 1 |
| 1.各部名称       | 3 |
| 2.操作方法及び使用方法 | 4 |
| 3.保守・点検      | 7 |
| 4.仕様         | 8 |
| 5.保証         | 8 |

はじめに

使い方

点検・保証

このたびはカワムラサイクルのムーンウォーカーシリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。

※ ご使用になる前に必ずお読みください。 また、お読みになった後は大切に保管してください。



株式会社 **カワムラサイクル**

## 安全に関するご注意 ※ご使用になる前に必ずお読みください。

### [表示マークの説明]

 **警告** この表示は「人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示は「人が障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

 **禁止** この表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

### **禁止**

- 道路通行の際は、必ず右側通行してください。また、歩道を通行してください。
- この車いすは、室内用に設計されています。平らな場所以外では、ご使用にならないでください。

はじめに

### **警告**

- この製品を火気に近付けないでください。  
※シート部が燃えたり、プラスチック等が変形したり、  
熱くなった金属部分でやけどするなど、危険です。
- 踏み切りを横断の際は、車輪をレールに対して直角にして走行してください。斜めの角度で進入するとレールの溝にはまって危険です。
- 背もたれに重いものなどを引っ掛けしないでください。転倒の危険性があります。
- この製品に乗り降りの際は、必ずブレーキをかけて車いすが固定されていることを確認してください。  
※傾斜地では駐車しないでください。傾斜地ではブレーキをかけても車いすが動く場合があります、大変危険です。  
※滑りやすい床面ではブレーキをかけても車いすが動く場合があります。
- 勝手に改造・分解しないでください。強度や耐久性が劣化して危険です。（保証対象外）
- 車いすを物品運搬など車いす以外の目的に使用しないでください。
- 座シート部以外に腰掛けしないでください。

## 注意

- 傾斜地での走行は、歩行器が予想外の方向に進むなど、大変危険です。
- この製品を投げたり落したり、衝撃を加えないでください。製品がひずみ、直進できなくなる恐れがあります。
- 夜間、雨降りは通行者や車から発見しにくくなります。充分にご注意ください。
- 認知症（痴呆症）の方がご使用される場合は、シート、部品等を飲み込むことが考えられますので充分ご注意ください。
- 認知症（痴呆症）の方がご使用される場合は、一度かけた駐車ブレーキを不意に解除されることがありますので、充分ご注意ください。
- 下記のようなところに車いすを放置しないでください。
  - ・車道に近いところ      ・人通りのあるところ      ・路面に段差や凸凹のあるところ
  - ・湿気の多いところ      ・雨風の当たるところ
- 座面高さを変える際は、座面シート部と左右フレームの間で手や指をはさまないように注意してください。
- 車いすとして使用される際は、座面にうまく座れない（お尻がすべる・座位保持困難等）場合は、ご使用をお避けください。また車いすとしての長時間の使用には適しておりません。
- 乗り降りの際には、ステップに乗らないでください。歩行器が起き上がり、転倒する恐れがあります。
- 肘掛けを上下させる際に、手をはさまないようにご注意ください。

# 1.各部の名称



全体図

## ①押手

高さを3段階で調節できます

## ②肘掛け

高さを7段階で調節できます  
(Sサイズは6段階)

## ③肘掛け(前もたれ)

開閉式です

## ④ステップ

歩行時には上方向にたたんでください

## ⑤5in キャスター(ノーパンク)

## ⑥8in 車輪(ノーパンク)

6輪、4輪に切り替えることができます

## ⑦座面シート

折りたたみができます

## ⑧背もたれ


## ⑨ブレーキレバー

## ⑩肘掛け高さ調整ノブ

## ⑪押手高さ調節ノブネジ

## ⑫座面高さ調節ネジ

はじめに

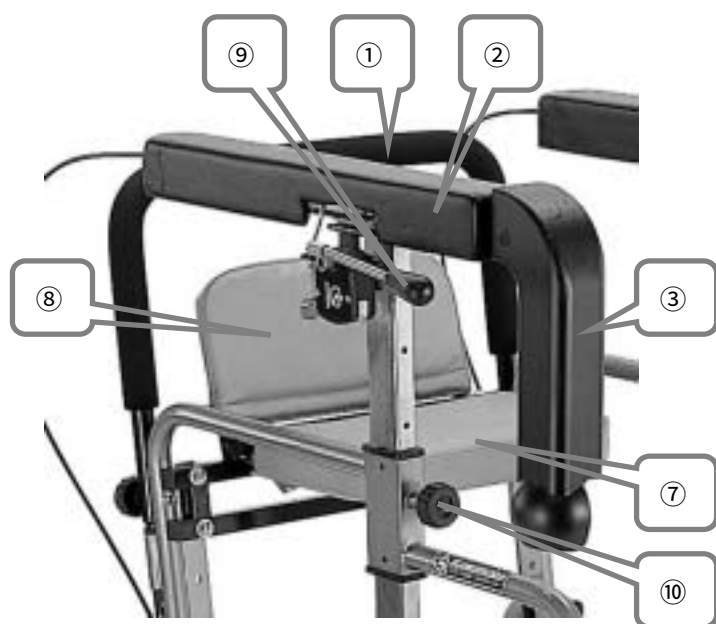

肘掛け部分拡大図



後ろから見た図

## 2.操作方法および使用方法

### ① 肘掛けの操作方法

#### <高さ調節の仕方>

肘掛け高さ調整ノブを引っ張り、片手で肘掛け部を持ちながら肘掛け部を上下にさせると、7段階（Sサイズは6段階）に高さを調節することができます。『カチッ』と音がして肘掛けがしっかりと固定されていることをご確認ください。





### ② 肘掛け（前もたれ）の操作方法

#### <開閉の仕方>

①②の順でまわすと開き<図1>、③④の順でまわすと閉まります<図2>。



※ご利用の際は肘掛けを必ず閉めてください。

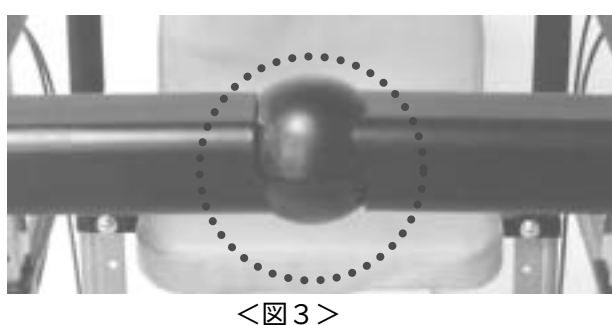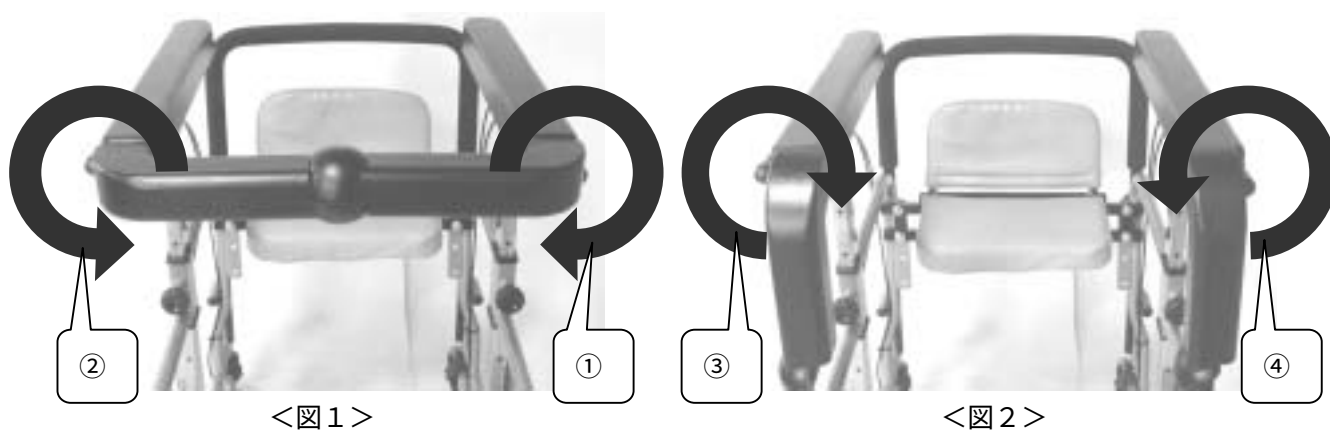

※しっかりと固定されていることを  
ご確認ください<図3>

### ③ ブレーキの操作方法と6輪、4輪切り替え方法

ブレーキレバーを下方（A の位置）に押しとブレーキがかかります。ブレーキレバーを真ん中（B の位置）に戻すとブレーキは解除されます。真ん中（B の位置）にある場合は6輪の状態、上方（C の位置）にある場合は4輪の状態となります。〔ブレーキレバーが真ん中（B の位置）もしくは上方（C の位置）にある場合は解除されています。〕

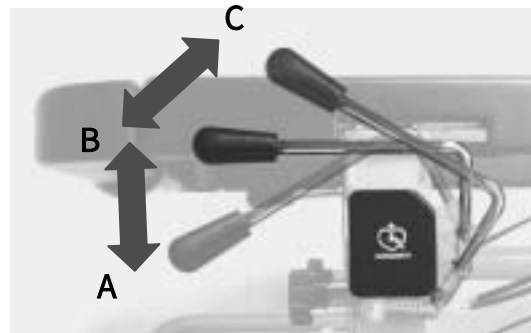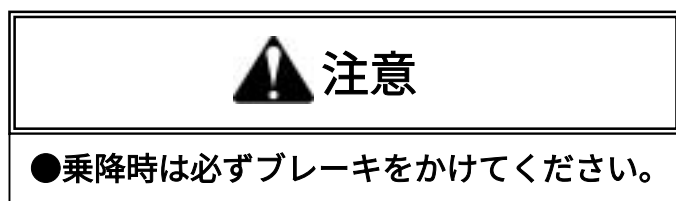


### ④ 座面高さ調節の仕方

座面下部の M8 ボルトを 4 本取り外し、取り付け位置を変えることにより 3 段階の高さ（50cm、55cm、60cm）の調節が行えます。

〔S サイズの座面高さは 50cm のみで取り付け位置を変更できません。〕

使用工具：プラスドライバー  
スパナまたはモンキーレンチ

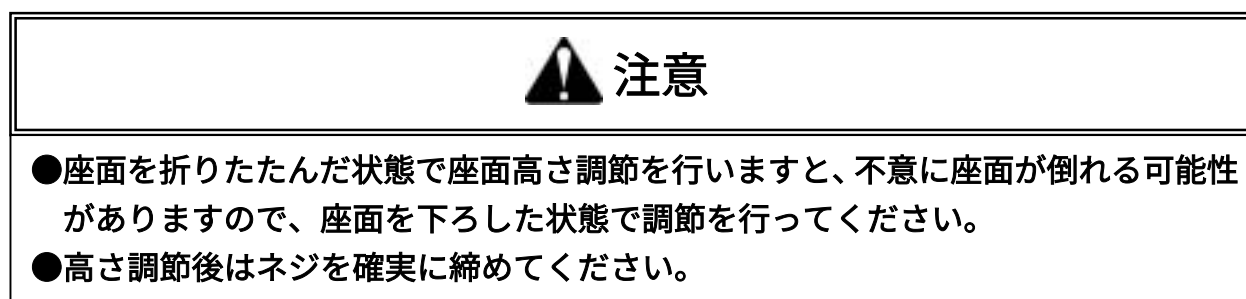

## ⑤ 押手高さ調節の仕方

ノブネジをまわして取り外し、押手パイプを設定したい高さにあわせます。高さをあわせたらノブネジを締めて固定します。

押手は3段階の高さ調節が可能です。(10cm 刻み)



**注意**

●高さ調節後はネジを確実に締めてください。



## ⑥ ステップの使用方法

歩行器としてご使用の場合はステップを上げてください。  
車いすとしてご使用の場合はステップを下げてください。

不要なときは、跳ね上げると足元のスペースが広がります。



## ⑦ こんな使い方ができます (使用イメージ)

自立への勇気ある一歩をお手伝いします。



肘掛けに体重をかけて



座面を利用して



介助用車いすとして

### 3.保守、点検

1ヶ月に一度は安全点検を行ってください!!

#### ★ブレーキはしっかりききますか？

ブレーキの取り付けネジの緩み、ブレーキ本体のガタなどがないかご確認ください。もし異常がございましたら、直ちにご使用をお止め頂き、すぐにお買い上げの販売店か当社までご連絡ください。

#### ★変な音がしませんか？

変な音がする場合、どこでその音が発生しているかをご確認してください。キャスター車輪のベアリング部の油分が不足しているなどの原因が考えられます。原因が不明な場合、修理不可能な場合はお買い上げの販売店か当社までご連絡ください。

#### ★座面はしっかり固定されていますか？

座面の高さを調整する部分のネジがしっかり締まっているかをご確認ください。ネジが緩んでいるとぐらつきます。ネジが外れて座面がぐらついたり、外れたりすると大変危険です。ネジが緩んでいたら必ずしっかりと締めてください。

#### ★押手の高さを調整するノブネジはしっかり固定されていますか？

押手の高さを調整する部分のノブネジがしっかり締まっているかをご確認ください。ノブネジ緩んでいるとぐらつきます。ノブネジが外れて押手がぐらついたり、外れたりすると大変危険です。ネジが緩んでいたら必ずしっかりと締めてください。

点検・保証

#### ★ネジの緩みはありませんか？

ガタがある場合は、ネジの緩みや脱落が考えられます。ネジが緩んでいたら必ずしっかりと締めてください。締めてもすぐ緩む、締まらないなどの不具合があれば、直ちにご使用をお止め頂き、すぐにお買い上げの販売店か当社までご連絡ください。



**注意**

- スパナやドライバーなどの工具の使用にて締め付ける場合、薄手の手袋をご使用ください。
- 異常が見つかったらご使用を中止してください。

## 4.仕 様

| 品名・名称           | 標準仕様・規格                |                         |                        |
|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
|                 | KW-MMX-S               | KW-MMX-M                | KW-MMX-L               |
| 肘掛け高さ (mm)      | 6 2 0～1,0 1 0<br>(7段階) | 7 1 0～1,1 1 0<br>(7段階)  |                        |
| 肘当て内幅 (mm)      | 3 6 0                  | 4 2 0                   | 4 8 0                  |
| 座面高さ (mm)       | 5 0 0                  | 5 0 0・5 5 0・6 0 0 (3段階) |                        |
| 座面サイズ (mm)      | 幅3 0 0x 奥行き1 9 0       |                         |                        |
| 全 幅 (mm)        | 5 7 0                  | 6 3 0                   | 6 9 0                  |
| 全 高 (mm)        | 750・850・950<br>(3段階)   | 850・950・1,050<br>(3段階)  | 850・950・1,050<br>(3段階) |
| 全 長 (mm)        | 8 3 0                  |                         |                        |
| 重 量 (kg)        | 1 7 . 3                | 1 8 . 1                 | 1 8 . 3                |
| 前後車輪 (インチ)      | 5 インチ ノーパンク            |                         |                        |
| 中央車輪 (インチ)      | 8 インチ ノーパンク            |                         |                        |
| フレーム            | スチール製 塗装仕上げ (ローズ/ブルー)  |                         |                        |
| 座シート            | 緑色 (№4 3)              |                         |                        |
| フットプレート (ステップ板) | d.タイプ 黒色               |                         |                        |

## 5.保証

点検・保証

### ★保証書

この商品には保証書を別途添付しております。保証書は所定の事項を記入のうえ、商品購入後 1 ヶ月以内に当社へご返送ください。

保証期間はご購入日より 1 年間です。

### ★補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこの商品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5 年保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ★修理のご依頼

異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

### ★保証期間後

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

### ★保証の適用除外となる場合

(a) ご使用による消耗品および取扱不注意による破損

例) タイヤの磨耗およびパンク、シート、フットプレートの破損等

(b) 地震、台風、水害などの天災および事故、火災による焼失・破損

(c) お取扱の不注意、操作未熟ならびに故意または過失など誤って使用されたことによる破損

(d) 保全上の不備および弊社の特約販売店以外で行った修理や改造等による破損

(e) 弊社が指定する純正部品以外のパーツ等の使用により発生した破損

地球の環境保護のため、  
廃棄するときはそのまま放置しないで  
各自治体の取り決めにしたがってください。



|              |                             |                 |
|--------------|-----------------------------|-----------------|
| ■本社          | 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1 | TEL078-969-2800 |
| ■本店サービスセンター  | 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1 | TEL078-969-2820 |
| ■仙台サービスセンター  | 〒981-1106 宮城県仙台市太白区柳生 4-3-6 | TEL022-381-8350 |
| ■東京サービスセンター  | 〒110-0013 東京都台東区入谷 1-8-3    | TEL03-3874-3511 |
| ■横浜サービスセンター  | 〒220-0073 横浜市西区岡野 2-12-9    | TEL045-290-9585 |
| ■名古屋サービスセンター | 〒487-0027 愛知県春日井市松本町 1-3-11 | TEL0568-52-4800 |
| ■大阪サービスセンター  | 〒564-0044 大阪府吹田市南金田 2-20-10 | TEL06-6190-8488 |
| ■福岡サービスセンター  | 〒819-0055 福岡市西区生の松原 1-18-3  | TEL092-882-4722 |
| ■神戸工場        | ■神戸第二工場                     | ■いなみの工場         |
|              |                             | ■メンテナンスセンター     |

修理・お手入れ・お取扱いなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、上記へ。